



Receiver-in-het-hoortoestellen, oplaadbaar

ReSound Vivia

ReSound Savi

Gebruikershandleiding

Informatie hoortoestel

Linker hoortoestel		Rechter hoortoestel	
Serienummer		Serienummer	
Modelnummer		Modelnummer	
Batterij type	Oplaadbaar		

Type eartip/oorstukje	Gesloten Dome ☐ Klein ☐ Medium ☐ Groot	Open Dome ☐ Klein ☐ Medium ☐ Groot	Power Dome ☐ Klein ☐ Medium ☐ Groot	☐ Tulip dome	☐ Oorstukje
--------------------------	---	--	--	--	------------------------------------

Programma	Toon	Omschrijving
1	Eén toon	
2	Twee tonen	
3	Drie tonen	
4	Vier tonen	

Inhoud

Informatie hoortoestel	2
Inleiding	4
Uw hoortoestel leren kennen	7
Uw hoortoestellen klaarmaken voor gebruik	10
Uw hoortoestellen in uw oren plaatsen	14
Uw hoortoestellen uit uw oren halen	19
Uw hoortoestellen gebruiken	21
Onderhoud	30
Geavanceerde opties	44
Draadloze accessoires	49
Tinnitusbeheer	51
Algemene waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen	61
Cyberbeveiliging	65
Problemen oplossen	66
Juridische informatie	68
Technische specificaties	74
Aanvullende informatie	77

Inleiding

Om optimaal van uw hoortoestellen te genieten, raden wij u aan ze dagelijks te gebruiken.

LET OP: Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw hoortoestellen in gebruik neemt.

Beoogd doel

Het hoortoestel is bedoeld om gehoorverlies te compenseren door geluid te versterken en door te geven aan het oor.

Gebruikersprofiel

- Het hoortoestel is bedoeld voor volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder.
- Het hoortoestel is bedoeld om gebruikt te worden door leken.
- Het hoortoestel is bedoeld om aangepast te worden door gekwalificeerde hoorspecialisten.

Therapeutische indicaties

Binnenoor-, geleidend of gemengd gehoorverlies.

Contra-indicaties

De hoorspecialist dient een potentiële hoortoestelgebruiker direct door te verwijzen naar een bevoegd (oor)arts alvorens een hoortoestel te geven als wordt vastgesteld via ondervraging, observatie of inzien van andere beschikbare informatie dat er sprake is van:

- Zichtbare aangeboren of traumatische misvorming van het oor.
- Geschiedenis van actieve drainage van het oor de afgelopen 90 dagen.
- Plotseling of sterk progressief gehoorverlies in de afgelopen 90 dagen.
- Acute of chronische duizeligheid.
- Eenzijdig gehoorverlies dat plotseling of in de laatste 90 dagen is ontstaan.
- Audiometrisch air-bone gap gelijk aan of groter dan 15 dB bij 500 Hertz (Hz), 1000 Hz en 2000 Hz.
- Zichtbaar bewijs van aanzienlijke ophoping van oorsmeer of een vreemd object in de gehoorgang.
- Pijn of onaangenaam gevoel in het oor.

Bijwerkingen

Als u bijwerkingen ervaart, neem dan contact op met een hoorspecialist of een arts. Mogelijke bijwerkingen van het dragen van een hoortoestel zijn:

- Duizeligheid
- Tinnitus
- Duidelijke verergering van het gehoorverlies
- Misselijkheid
- Hoofdpijn
- Huidreactie
- Ophoping van oorsmeer

Symbolen

De onderstaande symbolen worden gebruikt in deze gebruikershandleiding, op het apparaat of op de verpakking.



VOORZORGSMAATREGEEL: Wijst op een situatie die kan leiden tot licht en matig letsel.



WAARSCHUWING: Wijst op een situatie die kan leiden tot ernstig letsel.



Productiedatum.



Wettelijke fabrikant.



Conformiteitsmerk voor EU met nummer van de aangemelde instantie.



Volg de gebruiksinstructies. (Logo in blauw)



Unieke identificatiecode voor medische hulpmiddelen.



Medisch hulpmiddel.



REF Catalogusnummer.



Serienummer.



Product is een Type B toegepast onderdeel.



Markering voor naleving van regelgeving in Australië en Nieuw-Zeeland.



IMDA-label voor Singapore.



Markering voor naleving van regelgeving in Japan.




De apparatuur bevat een RF-zender.



Volg de lokale voorschriften bij het weggooien van elektronische apparaten.

Uw hoortoestel leren kennen

Hoortoestel

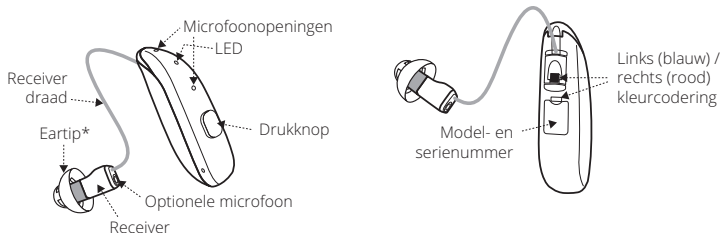

*Open Dome wordt afgebeeld. De uwe kan er anders uitzien.

Eartips en oorstukjes



Tulip dome



Gesloten
Dome



Open Dome




Power
Dome



Op maat
gemaakt
oorstukje

Eartips zijn allemaal lichtgrijs van kleur.

Receivers

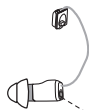

Microfoon

Het kan zijn dat uw receiver beschikt over een microfoon, zoals hier te zien is.




Kleurcodering
links/rechts

Uw hoortoestellen hebben een kleurmarkering.
Links = blauw. Rechts = rood.

Sportlock (optioneel)

De sportlock houdt uw hoortoestel op zijn plek als u fysiek actief bent.

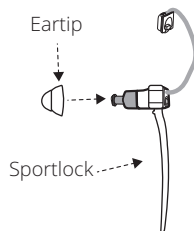

Uw hoortoestellen klaarmaken voor gebruik

Batterij waarschuwingen



WAARSCHUWING:

- Gebruik om veiligheidsredenen alleen de oplader die geleverd is bij uw hoortoestel.
- Oplaadbare hoortoestellen worden ondersteund door een niet-verwijderbare oplaadbare lithium-ion batterijcel. Blootstelling aan of inslikken hiervan kan ernstige gevolgen hebben.
- Lekkage van de batterij kan chemische brandwonden veroorzaken. Als u in contact komt met materiaal dat uit een batterij lekt, spoel dit dan onmiddellijk af met warm water. Als u chemische brandwonden, roodheid of huidirritatie oploopt door lekkende batterijen, roep dan de hulp van een arts in.
- Steek uw oplaadbare hoortoestel nooit in uw mond.
- U mag lithium-ion batterijen nooit inslikken of in lichaamsdelen plaatsen, omdat dit binnen twee uur of minder dodelijk letsel kan veroorzaken. Als een oplaadbaar hoortoestel of een lithium-ion batterij wordt ingeslikt of in een lichaamsdeel wordt geplaatst, moet u onmiddellijk medische hulp inroepen.
- Als de buitenste behuizing van uw oplaadbare hoortoestel stuk is, kan de oplaadbare batterij die erin zit gaan lekken. Gebruik het hoortoestel niet langer. Neem contact op met uw hoorspecialist.

- Batterijen zijn schadelijk voor het milieu. Probeer ze daarom nooit te verbranden. Gooi uw gebruikte oplaadbaar hoortoestel weg volgens lokale verordeningen of lever ze in bij uw hoorspecialist.
- Dit hoortoestel is voorzien van een lithium-ion batterij. In zeldzame gevallen kunnen lithium-ionbatterijen erg warm worden. Het verdient de aanbeveling om aandachtig te zijn bij het opladen.

LET OP:

- Zet uw hoortoestellen uit als u ze niet gebruikt, om de batterijen te sparen.

Uw hoortoestellen opladen

Laad uw hoortoestellen voor gebruik eerst volledig op. Dit is slechts een voorzorgsmaatregel om ervoor te zorgen dat u niet onverwacht zonder stroom komt te zitten. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw hoortoesteloplader om te leren hoe u uw hoortoestellen op kunt laden.

Indicatie batterij bijna leeg

Als de batterij bijna leeg is, verlaagt het volume in uw hoortoestellen en hoort u iedere 15 minuten een melodietje, totdat er geen stroom meer is. Uw hoortoestellen worden dan uitgeschakeld.

Indicatie batterij bijna leeg wanneer gekoppeld aan draadloze accessoires

De batterijen gaan sneller leeg als u gebruik maakt van draadloze functies zoals streaming van uw smart toestel of van uw televisie met onze TV Streamer. Wanneer de batterijen leeg raken, kunt u de draadloze functionaliteit niet meer gebruiken. Er wordt iedere vijf minuten een kort melodietje gespeeld om u te informeren dat de batterij bijna leeg is. In onderstaande tabel ziet u hoe de functionaliteit vermindert als de batterij leger raakt.

Batterijniveau	Signaal	Hoortoestel	Remote Control	Streaming
Volledig opgeladen		✓	✓	✓
Bijna leeg	 4 gelijke tonen	✓	✓	x
Leeg	 3 gelijke tonen en 1 langere toon	✓	x	x

Deze werken weer als u het hoortoestel oplaadt.

U kunt de batterij status controleren door het hoortoestel in de hoortoestel oplader te plaatsen (enkel premium charger). U kunt het batterijniveau ook zien in de ReSound Smart 3D™-app.

Uw hoortoestellen in uw oren plaatsen

Links en rechts uit elkaar houden




VOORZORGSMAATREGEEL: Indien u twee hoortoestellen heeft, dan kunnen deze verschillende instellingen hebben. Verwissel ze niet, dit kan schade aan uw gehoor toebrengen. Uw hoortoestellen hebben een kleurmarkering.

Links = blauw. Rechts = rood.

Als uw hoortoestellen geen kleurmarkering hebben, vraag uw hoorspecialist hier dan om.


Linker hoortoestel

(blauwe markering op de receiver)

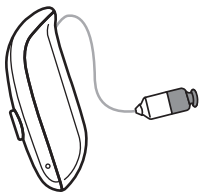

Rechter hoortoestel


(rode markering op de receiver)

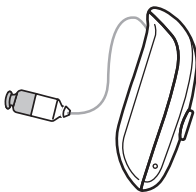


De receiver-eartip in uw oor plaatsen

Als u hoortoestellen heeft met eartips, volg dan deze instructies:


1. Hang het toestel over uw oor.

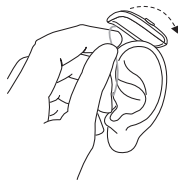

2. Pak de receiver tube vast bij de kromming en plaats de eartip in de gehoorgang.

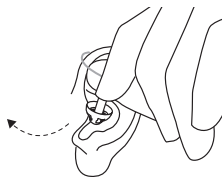

3. Druk de eartip diep genoeg in de gehoorgang, zodat de receiver tegen uw hoofd rust. Controleer dit met een spiegel.

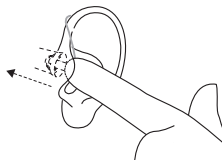



VOORZORGSMAATREGEL: Probeer nooit de vorm van de receiver te veranderen.

LET OP:

- Om fluittonen te voorkomen, is het belangrijk dat u de receiver en de eartip correct in uw oor plaatst. Als u fluittonen blijft horen, kijk dan welke andere mogelijke oorzaken en oplossingen hiervoor zijn in de handleiding voor het oplossen van problemen.

Sportlock

Als u veel beweegt, kan het zijn dat uw hoortoestellen verschuiven. Om dit te voorkomen kan uw hoorspecialist een sportlock aan de receiver bevestigen.

Een hoortoestel met Sportlock plaatsen:

1. Plaats het hoortoestel zoals gewoonlijk.
2. Plaats de sportlock onderin de oorschelp (het deel van het oor net buiten de gehoorgang).




LET OP: Sportlocks kunnen in de loop der tijd stijf, broos of verkleurd raken. Neem contact op met uw hoorspecialist voor vervanging. Uw hoorspecialist helpt u bij het vervangen.


Oorstukjes in uw oren plaatsen

Als u hoortoestellen heeft met oorstukjes, volg dan deze instructies:


1. Neem het oorstukje tussen duim en wijsvinger en plaats de geluidsuitgang in de gehoorgang.

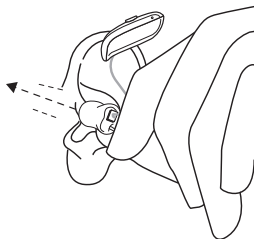

2. Plaats het oorstukje in uw oor met een voorzichtig draaiende beweging. Beweeg het oorstukje naar boven en beneden terwijl u lichte druk uitoefent. Het openen en sluiten van de mond kan het plaatsen vergemakkelijken.

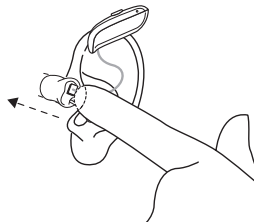

3. Plaats het hoortoestel achter uw oor en controleer of het goed zit. Bij correcte plaatsing zitten uw hoortoestellen stevig en comfortabel.

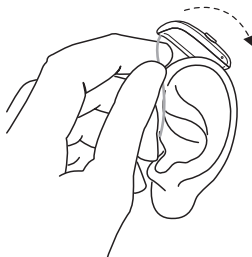



LET OP: Trek met uw vrije hand uw oorschelp voorzichtig naar achteren en omhoog om het plaatsen van het oorstukje te vergemakkelijken.

LET OP: Als de receiverdraad voor je oorstukje stijf, broos of verkleurd raakt, moet het worden vervangen. Raadpleeg uw hoorspecialist.

Uw hoortoestellen uit uw oren halen

Receiver-eartips uit uw oren halen


Als u hoortoestellen heeft met eartips, volg dan deze instructies:

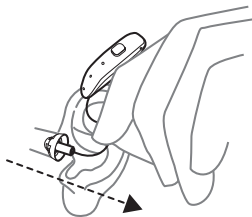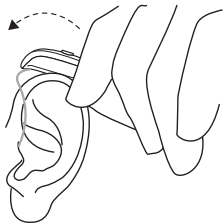


1. Neem het hoortoestel achter uw oor vandaan.
2. Neem de receiver tube bij de kromming tussen duim en wijsvinger en trek de eartip uit de gehoorgang.

Oorstukjes uit uw oren halen

Als u hoortoestellen heeft met oorstukjes, volg dan deze instructies:

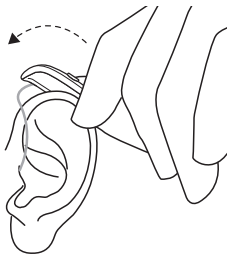

1. Neem het hoortoestel achter uw oor vandaan. Laat het even naast uw oor hangen.

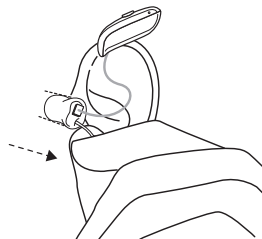

2. Pak het oorstukje met duim en wijsvinger vast (niet het hoortoestel of de tube) en neem het uit het oor. Als uw oorstukje een trekkoordje heeft, gebruik het dan. Het trekkoordje wordt op verzoek aan het oorstukje vastgemaakt. Verwijder het oorstukje met een voorzichtig draaiende beweging.

Uw hoortoestellen gebruiken


Uw hoortoestellen in- en uitschakelen

Om de hoortoestellen in of uit te schakelen, drukt u **5 seconden** op de drukknop.

Als u langer of korter op de knop drukt, schakelt u andere functies in, zoals de vliegtuigmodus of streaming. Deze functies worden elders in deze gebruikershandleiding beschreven.

Uw hoortoestellen worden automatisch in de slaapstand gezet als u ze in de ingeschakelde oplader plaatst, en ze worden automatisch weer ingeschakeld als u ze uit de ingeschakelde oplader haalt.

De hoortoestellen starten altijd in programma 1, met het vooraf ingesteld volume.

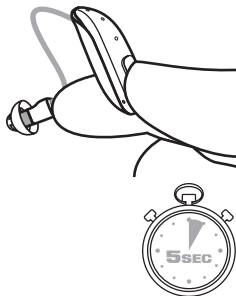

Uitleg van de indicatielampjes op het hoortoestel:

- Groene lampje licht eenmalig 2 seconden op: Het hoortoestel wordt ingeschakeld en staat aan.
- Groene lampje knippert drie keer 1 seconde: Het hoortoestel wordt uitgeschakeld.
- Hoortoestel in de oplader, knipperend groen lampje: Het hoortoestel wordt opgeladen.
- Wanneer het hoortoestel in de oplader zit, brandt het lampje voortdurend groen: Het hoortoestel is volledig opgeladen.

Smart Start

Smart Start vertraagt de opstarttijd van uw hoortoestellen nadat u of de hoortoestellen uit de oplader heeft gehaald. Als deze functie geactiveerd is, hoort u gedurende iedere seconde van de inschakeltijd een toon (gedurende 5 of 10 seconden).

Smart Start vertraagt wanneer er geluid in uw hoortoestel doorkomt. Dit biedt u de tijd om uw hoortoestel te plaatsen zonder fluittonen of andere problemen.

LET OP: Als u deze functie niet wilt gebruiken, vraag uw hoorspecialist dan om deze uit te schakelen.

Luisterprogramma's

Uw hoorspecialist kan één of meer luisterprogramma's in uw hoortoestellen inschakelen. Deze programma's kunnen ondersteuning bieden in specifieke situaties. Vraag uw hoorspecialist welke programma's handig kunnen zijn voor u.

Programma's	Gebruik
All-Around	Dynamische aanpassing - de beste optie als u slechts één programma wilt.
Hoor in Ruis	Speciaal programma om spraak te horen op zeer luide plaatsen zoals restaurants of sociale bijeenkomsten.
Muziek	Voor het luisteren naar muziek.
Akoestisch telefoneren	Een speciaal programma voor telefoongesprekken.
Buiten	Voor gebruik buiten (om windruis te verminderen).

Apps

We hebben verschillende apps waarmee u uw hoortoestellen kunt bedienen. U kunt deze gebruiken om het volume aan te passen, van programma te wisselen en te streamen vanaf een ander apparaat. Zie "Geavanceerde opties", pagina 44.

De drukknop gebruiken

In dit gedeelte worden de standaardinstellingen van de drukknop beschreven. Indien nodig kan uw hoorspecialist de standaardinstellingen aan uw behoeften aanpassen.

Hoe de drukknop werkt, hangt ervan af of u één of twee hoortoestellen hebt.



Van programma wisselen

Druk op de knop op uw hoortoestel om naar een ander luisterprogramma te wisselen. Uw hoortoestellen laten een toon horen om de wissel te bevestigen. Blijf drukken om door de beschikbare programma's te bladeren. Het aantal tonen geeft aan welk programma u hebt geselecteerd.

- Als u één hoortoestel hebt, drukt u de knop korter dan 1 seconde in.
- Als u twee hoortoestellen hebt, drukt u 2 tot 3 seconden op de knop op uw rechterhoortoestel.

Blijf bladeren om terug te keren naar het basis luisterprogramma, of schakel de hoortoestellen uit en weer in.

LET OP: Als u twee hoortoestellen heeft waarvan synchronisatie ingeschakeld is, worden programmawijzigingen in het ene toestel automatisch overgenomen door het andere toestel.

Het volume regelen

Als u maar één hoortoestel hebt, kunt u het volume alleen via onze app of de remote control aanpassen.

Als u twee hoortoestellen hebt, kunt u het volume verhogen of verlagen door op de knop op elk hoortoestel te drukken. U kunt ook onze app of afstandsbediening gebruiken.

- Om het volume hoger te zetten, drukt u minder dan 1 seconde op de knop van het rechter hoortoestel.
- Om het volume lager te zetten, drukt u minder dan 1 seconde op de knop van het linker hoortoestel.

LET OP: Uw hoortoestel past het volume automatisch aan afhankelijk van uw luistersituatie. Dit betekent dat u normaal gesproken het volume niet handmatig zult moeten aanpassen.

Geluid naar uw hoortoestellen streamen

- Als u één hoortoestel hebt, drukt u 2 tot 3 seconden op de drukknop.
- Als u twee hoortoestellen hebt, drukt u gedurende 2 tot 3 seconden op de drukknop op uw linkerhoortoestel.

Uw hoortoestellen streamen nu vanaf het door u geselecteerde audio-apparaat.

LET OP: Voordat u naar uw hoortoestellen kunt streamen, moet u ze aan uw audio-apparaat koppelen. Zie de gebruikersinstructies van uw audio-apparaat over hoe u dit kunt doen.

Vliegmodus

U kunt de drukknop ook gebruiken om het hoortoestel in vliegmodus te zetten (draadloze modus uit).

- Schakel uw hoortoestel uit en druk 9 seconden op de drukknop.
- Als u twee hoortoestellen heeft, moet u dit voor elk hoortoestel afzonderlijk doen.

Zie "Vliegtuigmodus / Modus draadloze communicatie uit", pagina 47 voor meer informatie.

Overzicht van de functionaliteit van drukknoppen

Uw hoorspecialist kan de standaardinstellingen voor de drukknop wijzigen. De nieuwe instellingen kunnen in onderstaande tabel worden ingevuld:

Knop indrukken	Eén hoortoestel	Twee hoortoestellen		Nieuwe instelling	
		Links	Rechts	Links	Rechts
Tot 1 seconde	Programma wijzigen	Volume naar omlaag	Volume naar omhoog		
2 tot 3 seconden	Streaming activeren	Streaming activeren	Programma wijzigen		
5 seconden	Hoortoestel in- of uitschakelen				
9 seconden	Activeer vliegtuigmodus				

Mobiele gesprekken aannemen (tikbediening)

- Om een inkomende oproep te beantwoorden, tikt u tweemaal op het bovenste deel van uw buitenoor of op uw hoortoestel.
- Om een inkomende oproep te weigeren, drukt u ong. 2 seconden op de drukknop op het hoortoestel.
- Om een oproep te beëindigen, drukt u eenmaal kort op de drukknop van het hoortoestel.

LET OP:

- Voordat u uw hoortoestellen kunt gebruiken voor telefoongesprekken, moet u ze koppelen met uw mobiele apparaat. Zie de gebruikersinstructies van uw mobiel apparaat voor meer informatie over de wijze waarop u dit kunt doen. Zie "Geavanceerde opties", pagina 44.
- U kunt de ReSound Smart 3D™ app gebruiken om de tikbediening op elk hoortoestel te activeren.

Het volume regelen

Uw hoortoestel past het volume automatisch aan afhankelijk van uw luistersituatie.


U kunt het volume echter ook handmatig aanpassen met behulp van de ReSound Smart 3D™ app of onze remote control. Afhankelijk van uw hoortoestel kunt u het volume mogelijk ook aanpassen met de drukknop. Zie "De drukknop gebruiken", pagina 24.

Een telefoon gebruiken

Met uw hoortoestel kunt u de telefoon gebruiken zoals u dat normaal gesproken doet. Het vinden van de juiste positie van de telefoon, vergt soms enige oefening.

De volgende tips kunnen van pas komen:

- Houd de telefoon bij uw oor zoals u gewend bent, of in de buurt van de microfoons van het hoortoestel zoals afgebeeld.
- Als u een fluittoon hoort, houd de telefoon dan een aantal seconden in dezelfde positie. Het hoortoestel kan de fluittonen mogelijk annuleren.
- U kunt ook proberen de telefoon iets verder van het oor vandaan te houden.

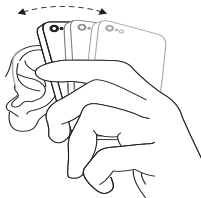

LET OP: Afhankelijk van uw wensen kan uw hoorspecialist een programma activeren dat speciaal geschikt is voor telefoneren.

Mobiele telefoons

Uw hoortoestel voldoet aan alle eisen met betrekking tot de Internationale Standaard voor Elektromagnetische Compatibiliteit. Eventuele storing kan aan uw mobiele telefoon of aan uw provider liggen.

LET OP:

- Als u een mobiel apparaat hebt, kunt u dit koppelen om direct verbinding te maken met uw hoortoestellen. Zie "Geavanceerde opties", pagina 44.
- Leidt het gebruik van uw mobiele telefoon in combinatie met uw hoortoestel niet tot het gewenste resultaat? Dan kan uw hoorspecialist u advies geven over beschikbare draadloze accessoires om de luistermogelijkheden te verbeteren. Zie ook "Draadloze accessoires", pagina 49.

Onderhoud

Reinigingsinstrumenten

Deze reinigingsinstrumenten worden met uw hoortoestellen meegeleverd:



- Zachte doek.
- Een borsteltje met een batterijmagneet.

Algemene instructies voor onderhoud

Om te zorgen voor de beste ervaring met en de langste levensduur van uw hoortoestellen, is het belangrijk ze schoon te houden en goed te onderhouden.

Om uw hoortoestellen te onderhouden, moet u ze één voor één schoonmaken en uit elkaar halen om te voorkomen dat ze door elkaar raken.

Volg deze stappen:

1. Als u uw hoortoestellen uitneemt, schakel ze dan uit.
2. Veeg uw hoortoestellen, nadat u ze heeft uitgenomen, met een zachte doek af om ze schoon en droog te houden.
3. Als u een droogmiddel gebruikt, gebruik dan alleen aanbevolen producten.
4. Breng cosmetica, parfum, aftershave, haarspray, crème, enz. aan voordat u uw hoortoestellen plaatst. Deze producten kunnen uw hoortoestellen beschadigen of doen verkleuren.

LET OP:

- Dompel uw hoortoestellen nooit onder in vloeistoffen.
- Laat uw hoortoestellen niet in de buurt van warmtebronnen of in direct zonlicht liggen.
- Het hoortoestel is stof-, spat- en waterbestendig:
 - Het hoortoestel heeft IP6X stof weerstand. Vermijd blootstelling aan overmatig stof.

- Het hoortoestel heeft IPX8 water weerstand. Vermijd blootstelling aan vloeistoffen en ga niet zwemmen, douchen of een sauna nemen terwijl u het hoortoestel draagt.



VOORZORGSMATREGEL:


- Gebruik alleen de aanbevolen droogmiddelen.
- Gebruik nooit alcohol of andere reinigingsmiddelen om uw hoortoestellen te reinigen. Dit kan uw hoortoestellen beschadigen en een huidreactie veroorzaken.
- Oorsmeer of ander vuil op uw hoortoestellen kan een infectie of allergie veroorzaken. Reinig uw hoortoestellen volgens de instructies om dit te voorkomen.

Dagelijks onderhoud

Het is belangrijk uw hoortoestel dagelijks schoon en droog te maken. Gebruik een doek en borstel om de hoortoestellen schoon te maken.



1. Veeg uw hoortoestellen af met een doek.

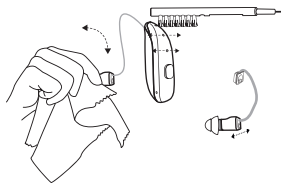

2. Veeg met een klein penseel over de microfoons. Als uw receiver een microfoon heeft, borstel deze dan ook schoon.

LET OP:

- Duw de haartjes van het kleine borsteltje of de reinigingsdraad nooit in de microfooningangen. Hierdoor kunnen uw hoortoestellen beschadigd raken.
- Gebruik geen water om de receiver draden en eartips of oorstukjes te reinigen.
- Gebruik een zachte, droge doek om de receivers en oorstukjes schoon te vegen.

Het oorstukje reinigen

Gebruik een zachte, droge doek om het oorstukje schoon te vegen.

LET OP: Als de receiverdraad voor je oorstukje stijf, broos of verkleurd raakt, moet het worden vervangen. Raadpleeg uw hoorspecialist.

De eartips van uw hoortoestel vervangen

We raden aan om te vragen of uw hoorspecialist wil laten zien hoe u eartips vervangt. U dient uw eartips iedere 3 maanden of vaker te vervangen, volgens het advies van uw hoorspecialist.


LET OP:

- Bij onjuiste plaatsing kunnen eartips in uw oor achterblijven als u het hoortoestel uitneemt.

Standaard eartips

Op de afbeeldingen ziet u een open dome, maar de procedure is hetzelfde voor gesloten domes. Volg deze instructies om uw eartips te vervangen.

1. Verwijder de gebruikte koepels door hem van de receiver te trekken en weg te gooien. Hiervoor kan enige kracht nodig zijn.
2. Druk de nieuwe eartip over de geribbelde rand van de receiver.
3. Controleer of de eartip stevig bevestigd is door te kijken of de kraag het geribbelde uiteinde van de receiver volledig afdekt.
4. Als de eartip correct geplaatst is, zit hij in een lichte hoek.

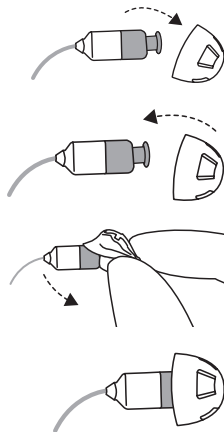


Tulip domes

Volg deze instructies om een tulpvormige eartip te vervangen:


1. Verwijder de gebruikte eartip door hem van de receiver te trekken en weg te gooien. Hiervoor kan enige kracht nodig zijn.




2. Duw het grootste blad naar achteren en duw de tulip dome over de geribbelde rand van de receiver.

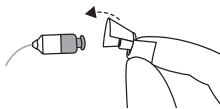


3. Controleer of de tulpvormige eartip stevig vastzit door te kijken of de kraag het geribbelde uiteinde van de receiver volledig afdekt.

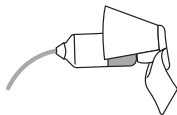

4. Duw het grotere blad in de richting van de receiver.

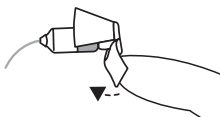


Op de afbeelding ziet u een correct geplaatste tulpvormige eartip. Controleer of het grootste blad aan de buitenzijde van het kleinste blad zit.

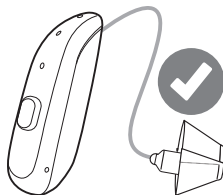

Filters vervangen

De filters voor uw hoortoestel worden geleverd in doosjes met telkens 8 filters. De behuizing met oorsmeefilters is gemarkeerd "WAX FILTER" gevolgd door een onderdeelnummer. De behuizing met microfoonfilters is gemarkeerd "MIC. FILTER" gevolgd door een onderdeelnummer. Uw hoorspecialist kan de onderdeelnummers gebruiken om bijkomende filters te bestellen.

Elk gereedschap heeft aan het ene uiteinde een kleine toonbocht (verwijderingstip) en aan het andere uiteinde een nieuw filter (vervangingsstip).

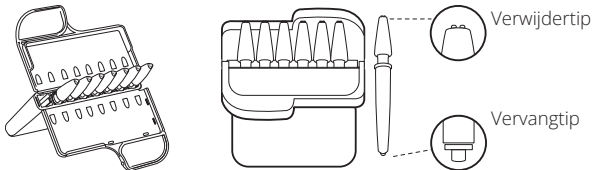

LET OP: De vorm van het filtergereedschap en het doosje kunnen variëren. De uwe kan er anders uitzien.

Als u zich niet op uw gemak voelt bij het vervangen van de oorsmeerfilters, vraag dan uw hoorspecialist om dit voor u te doen.

De oorsmeerfilter vervangen


Om een oorsmeerfilter te vervangen, heeft u de koffer met oorsmeerfiltergereedschap nodig.

De oorsmeerfilter zit op het uiteinde van de receiver. Het oorsmeerfilter helpt om oorsmeer uit de buurt te houden van de onderdelen van uw hoortoestel. U dient het regelmatig te vervangen. Informeer bij uw hoorspecialist hoe vaak u dit moet doen. Dit hangt af van hoeveel oorsmeer uw oren produceren.


Als u een eartip draagt, dient u deze te verwijderen voordat u de oorsmeerfilter gaat vervangen. Zie "De eartips van uw hoortoestel vervangen", pagina 34.

Het oude filter verwijderen


1. Verwijder de dome van de receiver.

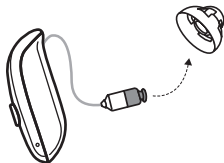


2. Open de filterhouder en neem er een staafje uit.

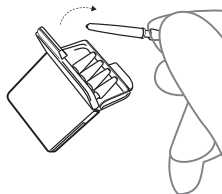

3. Plaats de verwijderingstip in het gebruikte filter.



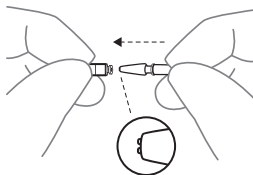


4. Trek het filtergereedschap er recht uit. Het is belangrijk om het filter er recht en niet schuin uit te trekken.

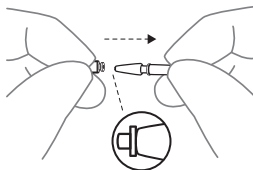

Het nieuwe filter plaatsen

1. Plaats het andere uiteinde van het filtergereedschap (het uiteinde met het nieuwe filter) in de geluidsuitgang.
2. Druk het nieuwe filter voorzichtig recht in de geluidsuitgang tot de buitenste ring de geluidsuitgang raakt.
3. Trek het filtergereedschap er recht uit. Uw nieuw filter blijft zitten. Bevestig de eartip weer of plaats een nieuwe.

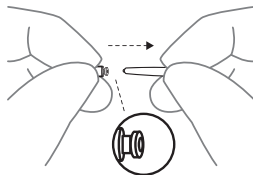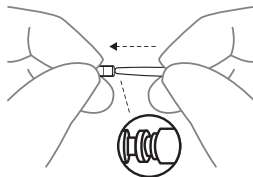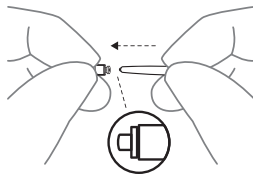


Microfoonfilter vervangen

De twee microfoons aan de achterkant van uw hoortoestel worden beschermd door een microfoonfilter. Als het geluid verslechtert of als u meer moeite hebt om te bepalen waar de geluiden vandaan komen, kan het vervangen van de filters helpen.


Om een microfoonfilter te vervangen, hebt u een doosje met microfoonfiltergereedschap nodig.

Het oude filter verwijderen


1. Open de filterhouder en neem er een staafje uit.

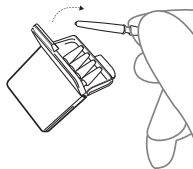

2. Plaats de verwijderingstip in het gebruikte filter.


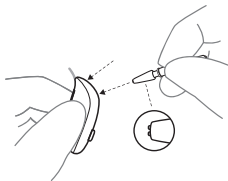


3. Trek het filtergereedschap er recht uit. Het is belangrijk om het filter er recht en niet schuin uit te trekken.

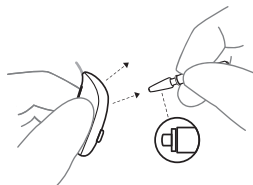


Het nieuwe filter plaatsen

1. Plaats het andere uiteinde van het filtergereedschap (het uiteinde met het nieuwe filter) in de microfoonopening. in de microfoonopening.
2. Druk het nieuwe filter voorzichtig recht in de microfoonopening tot de buitenste ring gelijk ligt met de achterkant van het hoortoestel.

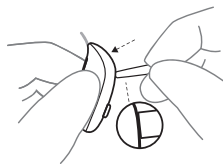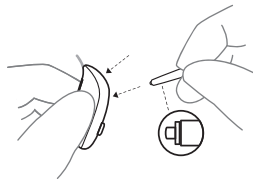

3. Trek het filtergereedschap er recht uit. Uw nieuw filter blijft zitten.

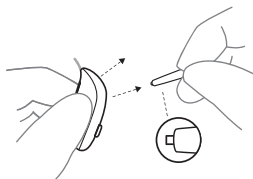

Geavanceerde opties

Uw hoortoestellen gebruiken in combinatie met iPhone, iPad en iPod touch (optioneel)

Uw hoortoestellen zijn ontworpen voor iPhone, iPad en iPod touch, waardoor directe audiostreaming, inclusief handsfree bellen vanaf de nieuwste iPhone- en iPad-modellen¹, en bediening vanaf deze mobiele apparaten mogelijk zijn.

Streamen vanaf een Android™-smartphone

Sommige Android-smartphones kunnen audio, inclusief telefoongesprekken, rechtstreeks naar uw hoortoestellen streamen. Zorg dat uw apparaat voorzien is van Android 13 of hoger.

¹Handsfree bellen is compatibel met iPhone 11 of nieuwer, iPad Pro 12,9-inch (5e generatie), iPad Pro 11-inch (3e generatie), iPad Air (4e generatie), iPad mini (6e generatie), iPad (10e generatie) of nieuwer, met software-updates iOS 15.3 en iPadOS 15.3 of nieuwer.

Uw hoortoestel bedienen met de app voor mobiele apparaten (optioneel)

De ReSound Smart 3D™ app kunt u uw hoortoestellen bedienen vanaf uw mobiele apparaten. U kunt de app gebruiken die speciaal ontwikkeld is voor uw hoortoestellen om updates voor uw hoortoestellen uit te voeren, uw hoortoestellen te zoeken, de batterijstatus te controleren of u kunt het als remote control gebruiken om van programma te wisselen of het volume aan te passen.

LET OP:

- De app mag alleen gebruikt worden met ReSoundhoortoestellen die er voor bedoeld zijn. De producent aanvaardt geen aansprakelijkheid als de app gebruikt wordt voor andere hoortoestellen.
- Schakel de app-notificaties niet uit.
- Installeer updates, zodat de app correct blijft werken.
- Als u een gedrukte versie van de handleiding van de smartphone app wenst, ga dan naar onze website (zie de achterkant van deze handleiding) of vraag hem aan bij de klantenservice.
- Wilt u deze apparaten koppelen en gebruiken met uw hoortoestellen? Neem voor hulp contact op met uw hoorspecialist of ga naar onze website.



ReSound Assist en ReSound Assist Live (optie)

ReSound Assist

Maakt u gebruik van ReSound Assist voor uw hoortoestellen, dan kunt u uw hoortoestellen op afstand laten bijstellen, zonder dat u daarvoor naar de hoorspecialist hoeft.

U heeft alleen maar een compatibel mobiel apparaat met internet nodig. Zo kunt u:

- Hulp vanop afstand vragen om uw hoortoestellen af te stellen, zodat ze beter passen voor u.
- Uw hoortoestellen up-to-date houden met de nieuwste software, om optimale prestaties te garanderen.

Deze service werkt alleen als uw mobiele apparaat internetverbinding heeft. Uw hoorspecialist geeft u graag meer informatie over hoe dit werkt in combinatie met de ReSound Smart 3D™-app.

Zorg voor optimale prestaties dat de hoortoestellen verbonden zijn met de ReSound Smart 3D™-app en dichtbij de iPhone, iPad, iPod touch of Android™ smartphone liggen voordat u de wijzigingen doorvoert.

LET OP: Uw hoortoestellen worden tijdens het installatie- en updateproces uitgeschakeld.

ReSound Assist Live

Deze service omvat ook ReSound Assist Live. Met deze service krijgt u persoonlijke hulp van uw hoorspecialist vanuit huis.

Vliegtuigmodus / Modus draadloze communicatie uit

Uw hoortoestellen kunnen draadloze signalen ontvangen. Ze kunnen bijvoorbeeld worden bediend vanaf uw mobiele apparaat of met de afstandsbediening. Er kan ook informatie verzonden worden tussen uw hoortoestellen. Op sommige plekken moet u echter de draadloze communicatie uitschakelen.



VOORZORGSMAATREGEL: Dit hoortoestel bevat een radiofrequentiezender (RF). Volg bij het instappen in een vliegtuig de aanwijzingen van de luchtvaartmaatschappij en schakel de draadloze functionaliteit van het hoortoestel uit wanneer dit vereist is.

LET OP: U dient onderstaande procedures te volgen voor beide hoortoestellen, zelfs als synchronisatie is ingeschakeld.

Draadloze communicatie uitschakelen (vliegtuigmodus inschakelen)

1. Schakel uw hoortoestel uit.
2. Houd de 9 seconden lang ingedrukt.

3. Het lampje op uw hoortoestel knippert vier keer dubbel. Als u uw hoortoestellen dan draagt, hoort u gedurende ongeveer 10 seconden dubbele tonen (🎵🎵), wat betekent dat het hoortoestel nu in vliegtuigmodus staat.

Draadloze communicatie activeren (Vliegtuigmodus uitschakelen)

1. Zet uw hoortoestel uit en weer aan.
2. De draadloze communicatie wordt na 10 seconden weer geactiveerd.

Draadloze accessoires

Er is een verscheidenheid aan draadloze accessoires beschikbaar als aanvulling op uw hoortoestellen. Met deze accessoires kunt u geluid en spraak rechtstreeks naar uw hoortoestellen streamen, waardoor u in verschillende dagelijkse situaties beter kunt horen en communiceren.

Beschikbare draadloze accessoires en hun features

- Met **een TV streamer** kunt u audio van de televisie en bijna iedere andere geluidsbron naar uw hoortoestellen streamen op een voor u aangenaam volume.
- Met **een basisafstandsbediening** wijzigt u het volume, zet u de hoortoestellen op stil en wisselt u van programma.
- **Een op het lichaam te dragen microfoon** is een microfoon die door anderen gedragen kan worden. Het verbetert het spraakbegrip in rumoerige situaties.
- **Een draadloze microfoon** werkt als de **microfoon die op het lichaam wordt gedragen**, maar doet ook dienst als tafelmicrofoon. Daarnaast beschikt het over een ingebouwde luisterspoel waarmee het verbinding kan maken met een ringleidingsysteem, een connector voor een FM-receiver en een mini-jackingang voor het bedraad streamen van audio vanaf een computer of muzikspeler.
- **Een app** die u op uw mobiele apparaat kunt installeren om direct vanaf uw mobiele apparaat te streamen en te bedienen. Zie "Geavanceerde opties", pagina 44.

Toegang tot draadloze accessoires

Om toegang te krijgen tot een draadloos accessoire dat al gekoppeld is aan uw hoortoestellen, drukt u 2 seconden op de drukknop. Het hoortoestel laat een geluid horen om de koppeling te bevestigen.



LET OP:

- Neem contact op met uw hoorspecialist voor een overzicht van compatibele draadloze accessoires die zijn goedgekeurd door GN Hearing A/S.
- U mag alleen door GN Hearing draadloze accessoires gebruiken voor uw draadloze hoortoestellen. Zie de gebruikershandleiding voor het desbetreffende draadloze accessoire voor informatie over het koppelen van uw hoortoestellen met een draadloze accessoire.

Tinnitusbeheer

Tinnitus Sound Generator-module

Uw hoortoestel ReSound beschikt over de module Tinnitus Sound Generator (TSG). Dit is een module voor het genereren van geluiden voor tinnitus behandelprogramma's, voor tijdelijke verlichting van tinnitus. De TSG genereert geluiden die zijn aangepast aan uw persoonlijke voorkeuren en aan de specifieke therapeutische wensen zoals vastgesteld door uw arts, audioloog of hoorspecialist. Afhankelijk van het geselecteerde luisterprogramma en de omgeving waarin u zich bevindt, hoort u soms het therapeutische geluid dat lijkt op een voortdurende of fluctuerende ruis.

Gebruik van de TSG-module

De Tinnitus Sound Generator-module is een instrument dat geluiden genereert die gebruikt worden in een tinnitusbeheerprogramma om tijdelijk verlichting te bieden bij eindgebruikers die lijden aan tinnitus. Het product is voornamelijk bestemd voor volwassenen ouder dan 18 jaar. Dit product kan ook gebruikt worden voor kinderen vanaf 12 jaar oud. Let op: kinderen en gebruikers met een lichamelijke of verstandelijke beperking hebben voor het plaatsen en verwijderen van het toestel met de TSG-module training nodig van een arts, audioloog, hoorspecialist of voogd.

Indien haalbaar geacht door de hoorspecialist, dan kan bijstelling van de Tinnitus Sound Generator-module op afstand in real-time uitgevoerd worden middels rechtstreekse communicatie met live audio, video en chat via de speciale app van de gebruiker.

Voor hoorspecialisten

De Tinnitus Sound Generator-module is bedoeld voor hoorspecialisten die eindgebruikers met tinnitus behandelen alsmede eindgebruikers met conventionele gehoorandoeningen. Het instellen van de Tinnitus Sound Generator-module dient ter plaatse te gebeuren bij een hoorspecialist die deelneemt aan een tinnitus behandelprogramma. Met de Indien haalbaar geacht door de hoorspecialist, dan kan bijstelling van de Tinnitus Sound Generator-module op afstand in real-time uitgevoerd worden middels rechtstreekse communicatie met live audio, video en chat via de speciale app van de gebruiker.

Gebruikersinstructies voor de TSG-module

Beschrijving van het toestel

De Tinnitus Sound Generator (TSG)-module is een softwaremodule die geluiden genereert voor tinnitus behandelprogramma's om tijdelijk verlichting te bieden bij tinnitus.

Uitleg van de werking van het toestel

De TSG-module is een op frequentie en amplitude gebaseerde witte ruisgenerator. Het ruisniveau en de frequentie-eigenschappen kunnen worden aangepast aan uw specifieke therapeutische behoeften, zoals vastgesteld door uw arts, audioloog of hoorspecialist.

Uw arts, audioloog of hoorspecialist kan de gegenereerde ruis voor u moduleren om het aangenamer te doen klinken. Het geluid lijkt dan bijvoorbeeld op het breken van golven op de kust.

Modulatie-niveau en -snelheid kunnen ook aangepast worden aan uw wensen en

behoeften. Met een extra optie die uw hoorspecialist kan activeren, kunt u vooraf ingestelde natuurgeluiden selecteren, zoals brekende golven of stromend water.

Als u twee draadloze hoortoestellen heeft die ear-to-ear synchronisatie ondersteunen, kan deze functie door uw hoorspecialist ingeschakeld worden. Hierdoor synchroniseert de Tinnitus Sound Generator het geluid in beide hoortoestellen.

Als u alleen in rustige omgevingen last heeft van tinnitus, kan uw arts, audioloog of hoorspecialist de TSG-module zo instellen dat deze alleen hoorbaar is in die omgevingen. Het volume kunt u bijstellen met de volumeregelaar. Uw arts, audioloog of hoorspecialist zal samen met u bepalen of een dergelijke regelaar nodig is.

Bij hoortoestellen waarbij ear-to-ear synchronisatie is ingeschakeld, kan uw hoorspecialist ook synchronisatie van het omgevingsgestuurde volume activeren. Hiermee wordt het TSG-ruisniveau automatisch gelijktijdig aangepast in beide hoortoestellen, afhankelijk van het volume van het achtergrondgeluid. Als het hoortoestel daarnaast een volumeregelaar heeft, kunnen de omgevingssturing en de volumeregelaar naast elkaar gebruikt worden om het ruisniveau in beide hoortoestellen aan te passen.

De wetenschappelijke concepten die de basis vormen voor het toestel

De TSG-module biedt geluidsverrijking met als doel het tinnitus geluid te omgeven met een neutraal geluid dat eenvoudig te negeren is. Geluidsverrijking is een belangrijk onderdeel van de meeste methoden voor tinnitus beheer, zoals Tinnitus Retraining Therapy (TRT).

Om gewenning aan tinnitus te ondersteunen, dient deze hoorbaar te zijn. Het ideale niveau van de TSG-module moet daarom zo ingesteld worden dat het mengt met de tinnitus, zodat u zowel de tinnitus als het toegepaste geluid kunt waarnemen.

In de meeste gevallen kan de TSG-module ook ingesteld worden om het tinnitus geluid te maskeren, voor tijdelijke verlichting door een prettigere en regelbare geluidsbron.

TSG volumeregeling

De geluidsgenerator is door de hoorspecialist ingesteld op een specifiek geluidsniveau. Als u de geluidsgenerator inschakelt, staat het volume op deze optimale instelling. Daarom hoeft u het volume waarschijnlijk niet handmatig te wijzigen. Het is echter ook mogelijk om het volume of de hoeveelheid stimulus naar uw eigen wens te regelen. Het volume van de Tinnitus Sound Generator kan alleen binnen de marge die door de hoorspecialist is ingesteld, aangepast worden.

De volumeregelaar is een extra optie in de TSG-module om het uitgangsniveau van de geluidsgenerator bij te stellen.

TSG gebruiken met smartphone-apps

De bediening van de Tinnitus Sound Generator via knoppen op het hoortoestel kan uitgebreid worden met draadloze bediening vanaf een bedieningsapp voor TSG op uw smartphone of mobiele apparaat. Deze functie is beschikbaar voor ondersteunde hoortoestellen als een hoorspecialist de TSG-functie tijdens het aanpassen van het hoortoestel heeft ingeschakeld.

LET OP: Om apps te gebruiken, moet het hoortoestel verbonden zijn met de smartphone of met het mobiele apparaat.

TSG - Technische specificaties

Signaalverwerkingstechnologie: Digitaal

Beschikbare geluiden

Het witte ruis signaal kan op de volgende manieren geconfigureerd worden:

Hoogdoorlaatfilter	Laagdoorlaatfilter
500 Hz	2000 Hz
750 Hz	3000 Hz
1000 Hz	4000 Hz
1500 Hz	5000 Hz
2000 Hz	6000 Hz
-	8000 Hz

De amplitude van het witte ruissignaal kan gemoduleerd worden met een modulatie diepte van maximaal 14 dB.



WAARSCHUWING:

Voorschrift voor gebruik van dit toestel

De TSG-module mag alleen gebruikt worden op voorschrift van een arts, audioloog of hoorspecialist. Om permanente gehoorschade te voorkomen, is de maximale gebruiksduur per dag afhankelijk van het volume van het gegenereerde geluid.

Neem contact op met uw hoorspecialist om TSG aan te passen.

Ervaat u bijwerkingen door het gebruik van de geluidsgenerator, zoals duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn, verminderd gehoor of toegenomen perceptie van de tinnitus? Stop dan direct met het gebruik van de geluidsgenerator en vraag om medisch advies.

Doelgroep

Het product is voornamelijk bestemd voor volwassenen ouder dan 18 jaar. Dit product kan ook gebruikt worden voor kinderen vanaf 12 jaar oud. Kinderen en lichamelijk of verstandelijk beperkte gebruikers hebben training nodig van een arts, audioloog, hoorspecialist, toezienend ouder of voogd voor het plaatsen en verwijderen van het hoortoestel met de TSG-module.

Belangrijk voor potentiële gebruikers van geluidsgenerators

Een tinnitusmaskeerder is een elektronisch apparaat dat geluid genereert met voldoende intensiteit en bandbreedte om interne ruis te maskeren. Hij wordt ook gebruikt als hulpmiddel bij het horen van externe geluiden en spraak.

Goede gezondheidszorg vereist dat iemand met tinnitus wordt onderzocht door een bevoegd arts (bij voorkeur een arts die gespecialiseerd is in aandoeningen van het oor), voordat hij of zij een geluidsgenerator gaat gebruiken. Bevoegde artsen die gespecialiseerd zijn in aandoeningen aan het oor worden vaak otorhinolaryngoloog, otoloog of otorhinolaryngoloog genoemd.

Het doel van een medisch onderzoek is ervoor te zorgen dat alle medisch te behandelen aandoeningen die van invloed zijn op tinnitus ontdekt en behandeld zijn, voordat de geluidsgenerator wordt gebruikt.

De geluidsgenerator is een instrument voor het genereren van geluiden die gebruikt worden na passend advies en/of bij een tinnitusbeheerprogramma om de effecten van tinnitus te verlichten bij eindgebruikers.

Waarschuwingen



WAARSCHUWING:

- Geluidsgenerators kunnen gevaar opleveren als ze niet goed worden gebruikt.
- Een geluidsgenerator mag alleen worden gebruikt op voorschrift van een arts, audioloog of hoorspecialist.
- Geluidsgenerators zijn geen speelgoed en moeten buiten bereik gehouden worden van iedereen die zichzelf hiermee ietsel zou kunnen toebrengen (met name kinderen en huisdieren).



VOORZORGSMATREGEL:

- Ervaart u bijwerkingen door het gebruik van de geluidsgenerator, zoals duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn, verminderd gehoor of toegenomen perceptie van de tinnitus? Stop dan direct met het gebruik van de geluidsgenerator en vraag om medisch advies.
- Stop het gebruik van de geluidsgenerator als u één van de volgende zaken ervaart en vraag direct advies aan een arts:
 - a. Zichtbare aangeboren of traumatische misvorming van het oor.
 - b. Geschiedenis van actieve drainage van het oor de afgelopen 90 dagen.
 - c. Plotseling of sterk progressief gehoorverlies in de afgelopen 90 dagen.
 - d. Acute of chronische duizeligheid.
 - e. Eenzijdig gehoorverlies dat plotseling of in de laatste 90 dagen is ontstaan.

- f. Zichtbaar bewijs van aanzienlijke ophoping van oorsmeer of een vreemd object in de gehoorgang.
 - g. Pijn of onaangenaam gevoel in het oor.
- Stop het gebruik van de geluidsgenerator en vraag direct advies aan uw hoorspecialist als u veranderingen in de perceptie van tinnitus, ongemak of verminderde spraakperceptie ervaart tijdens het gebruik van de tinnitus geluidsgenerator.
- De volumeregelaar van de TSG-module kunt u gebruiken voor het instellen van het volume van de geluidsgenerator. Bij kinderen of bij lichamelijk of verstandelijk beperkte mensen moet de volumeregelaar zo geconfigureerd worden dat het volume van de geluidsgenerator alleen lager kan en niet hoger.
- Kinderen en mensen met een fysieke of mentale beperking mogen het TSG-hoortoestel alleen onder toezicht van een volwassene dragen.
- Het aanpassen van de Tinnitus Sound Generator-instellingen met behulp van een smartphone-app, mag bij minderjarigen alleen door de ouder of wettelijke voogd worden gedaan.
- Gebruik van de ReSound Assist voor instellingen op afstand van de tinnitus geluidsgenerator mag bij minderjarigen alleen gedaan worden door de ouder of wettelijke voogd.



Tinnitus Sound Generator Waarschuwing voor hoorspecialisten

Een hoorspecialist moet, vóór het in gebruik nemen van een geluidsgenerator, een potentiële gebruiker doorverwijzen naar een bevoegd arts (bij voorkeur een KNO-arts). Als de hoorspecialist via ondervraging, observatie of inzien van andere beschikbare informatie concludeert dat de potentiële gebruiker een van de volgende aandoeningen heeft:

- a. Zichtbare aangeboren of traumatische misvorming van het oor.
- b. Geschiedenis van actieve drainage van het oor de afgelopen 90 dagen.
- c. Plotseling of sterk progressief gehoorverlies in de afgelopen 90 dagen.
- d. Acute of chronische duizeligheid.
- e. Eenzijdig gehoorverlies dat plotseling of in de laatste 90 dagen is ontstaan.
- f. Audiometrisch air-bone gap gelijk aan of groter dan 15 dB bij 500 Hertz (Hz), 1000 Hz en 2000 Hz.
- g. Zichtbaar bewijs van aanzienlijke ophoping van oorsmeer of een vreemd object in de gehoorgang.
- h. Pijn of onaangenaam gevoel in het oor.



VOORZORGSMATREGEEL: De maximale output van de geluidsgenerator valt binnen het bereik dat gehoorverlies kan veroorzaken volgens de OSHA-verordeningen. In overeenstemming met NIOSH-aanbevelingen mag de gebruiker de geluidsgenerator niet langer dan acht (8) uur per dag gebruiken als deze is ingesteld op 85 dB SPL of hoger. Als de geluidsgenerator is ingesteld op een niveau van 90 dB SPL of hoger dan mag de gebruiker de geluidsgenerator niet langer dan twee (2) uur per dag gebruiken. De geluidsgenerator mag nooit op oncomfortabele geluidsniveaus gebruikt worden.

Algemene waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen



WAARSCHUWING:

- Raadpleeg een hoorspecialist of een arts:
 - Als u denkt dat er een vreemd voorwerp in uw gehoorgang zit
 - Als u last heeft van huidirritatie
 - Als er zich overmatig oorsmeer ophoopt bij gebruik van het hoortoestel
- Zie ook "Contra-indicaties", pagina 4
- Zoek onmiddellijk medische hulp als een hoortoestel, een onderdeel ervan, een batterij of een magneet wordt ingeslikt, omdat dit verstikking kan veroorzaken en uw gezondheid kan schaden.
 - Houd hoortoestellen, hun onderdelen, batterijen en magneten buiten bereik van huisdieren, kinderen en mensen met een cognitieve, intellectuele of verstandelijke beperking.
 - Houd altijd toezicht op kinderen of mensen met cognitieve, intellectuele of mentale problemen wanneer ze hun hoortoestellen gebruiken. Hoortoestellen bevatten kleine onderdelen die gevaarlijk kunnen zijn als ze ingeslikt worden.
 - Draag uw hoortoestellen niet als u wordt blootgesteld aan straling. Sommige soorten straling, zoals MRI- of CT-scanners, kunnen de instellingen van uw hoortoestellen beïnvloeden. Dit kan storingen veroorzaken en uw gehoor mogelijk beschadigen.

- Andere soorten straling zoals van een inbraak alarm, bewegingsmelder, mobiele telefoons, metaaldetectors en radio-apparatuur beschadigen uw hoortoestel niet. Deze kunnen echter wel kort van invloed zijn op de geluidskwaliteit van uw hoortoestellen en ongewenste geluiden veroorzaken.
- Gebruik uw hoortoestellen nooit op plaatsen met explosieve gassen zoals mijnen, olievelden of vergelijkbaar, tenzij deze gebieden goedgekeurd zijn voor gebruik van hoortoestellen. Het gebruik van hoortoestellen op plaatsen die niet zijn goedgekeurd hiervoor kan gevaarlijk zijn.
- Probeer uw hoortoestellen niet te drogen in een oven, magnetron of ander verwarmingsapparaat. Hierdoor kunnen ze smelten en brandwonden op uw huid veroorzaken.
- Over het algemeen kan blootstelling aan harde geluiden uw gehoor beschadigen. Bijvoorbeeld harde muziek of een zeer rumoerige omgeving. U kunt uw gehoor het beste beschermen door de blootstelling aan harde geluiden en rumoerige omgevingen te beperken of door gehoorbescherming te gebruiken.
- Uw hoortoestellen zijn aangepast om zachte en harde geluiden te versterken volgens uw behoeften. Als de versterking te hoog lijkt of u vermoedt dat het hoortoestel niet correct werkt (het geluid klinkt bijv. vervormt of anders dan normaal), neem dan contact op met uw hoorspecialist. Een defect hoortoestel kan uw gehoor beschadigen.
- Gebruik alleen originele verbruiksartikelen (bijvoorbeeld oorsmeerfilters) voor uw hoortoestellen. Vraag uw hoorspecialist om meer informatie.
- Wijzigingen aan dit hoortoestel aanbrengen is niet toegestaan.

Waarschuwing met betrekking tot power-hoortoestellen

- Een power-hoortoestel kan zeer luid geluid produceren ter compensatie van ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies. Het risico bestaat dat het harde geluid het gehoor van de gebruiker verder beschadigt.



VOORZORGSMATREGEL:

- Gebruik uw hoortoestellen zoals aanbevolen door uw hoorspecialist. Onjuist gebruik kan uw gehoor beschadigen.
- Gebruik geen defecte of aangepaste hoortoestellen. Het werkt mogelijk niet correct en kan schadelijk zijn voor uw gehoor. Het kan ook krassen of wondjes veroorzaken door scherpe randen.
- Wijzig de vorm van uw hoortoestel of de bijbehorende accessoires niet. Dit kan huidreacties veroorzaken of scherpe randen die krassen of wondjes kunnen veroorzaken.
- Als u vermoedt dat er een eartip, oorsmeerfilter of ander object in uw gehoorgang zit, neem dan contact op met een hoorspecialist of arts. Deze objecten kunnen schadelijk zijn en een infectie in uw oor veroorzaken.

- Als u last heeft van een irritatie of wondje op de plek waar uw hoortoestel uw oor of hoofd raakt, kan doorgaan met dragen van het hoortoestel leiden tot verergering of het niet kunnen helen hiervan. Raadpleeg een hoorspecialist voor hulp.
- Uw hoortoestellen zijn afgesteld op uw gehoor. Laat anderen uw hoortoestellen niet gebruiken, omdat dit hun gehoor kan beschadigen.
- Indien de draadloze functionaliteit geactiveerd is, kan er via digitaal gecodeerde transmissie met andere draadloze apparaten gecommuniceerd worden. Het is mogelijk, maar niet waarschijnlijk, dat andere elektronische apparaten beïnvloed worden. Gebeurt dit, vergroot dan de afstand tussen het hoortoestel en desbetreffende apparatuur.

Voor hoorspecialisten



WAARSCHUWING:

- Het ontwikkelde geluidsdruk niveau in de oren van kinderen kan aanzienlijk hoger zijn dan bij een gemiddelde volwassene. Het wordt aanbevolen om een RECD-meting uit te voeren om ervoor te zorgen dat het doel correct is voor de geplaatste OSPL90.
- Bij het selecteren en aanpassen van hoortoestellen met een maximaal geluidsdruk niveau (maximaal OSPL90) van 132 dB SPL of hoger (IEC 60318-5:2006) dient speciale aandacht te worden besteed aan de keuze en aanpassing, omdat er een risico bestaat dat het resterende gehoor van de hoortoesteldrager verder wordt aangetast.



VOORZORGSMAATREGEL: Maak geen veranderingen aan de buitenste behuizing of onderdelen van een hoortoestel, tenzij voldoende beschermd tegen ESD.

Cyberbeveiliging

Als u deze waarschuwingen niet opvolgt, kan de informatie beveiliging van uw hoortoestel in gevaar komen en mogelijk gehoorverlies of tinnitus veroorzaken.



VOORZORGSMATREGEL:

- Sluit uw hoortoestel alleen aan op een vertrouwde computer of mobiel apparaat, of een apparaat dat uw hoorspecialist gebruikt.
- Gedurende 3 minuten na het starten staat uw hoortoestel open voor verbinding. Start uw hoortoestel niet opnieuw op als u daarom wordt gevraagd door iemand die u niet vertrouwt, omdat dit de veiligheid van uw toestel in gevaar kan brengen.
- Als uw toestel het koppelgeluid op een onverwacht moment afspeelt, kan dit erop wijzen dat iemand toegang heeft tot uw toestel.
- Sluit uw hoortoestel alleen aan op de officiële mobiele app van ReSound.
- Pas alleen fijnafstellingen op afstand toe die u verwacht.
- Gebruik altijd de recentste software-update voor uw hoortoestel.
- Accepteer alleen live assistentie oproepen van de hoorspecialist waarmee u heeft afgesproken.

Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Feedback of "fluittoon"	Is uw oorstukje of dome correct in het oor geplaatst?	Plaats het opnieuw.
	Staat het volume heel hoog?	Verlaag het volume.
	Is de receiver tube beschadigd of is het oorstukje verstopt?	Bezoek uw hoorspecialist.
	Is er een object (bijv. een hoed of een telefoon) dichtbij het hoortoestel?	Zorg dat er meer ruimte zit tussen het hoortoestel en het voorwerp.
	Zit er veel oorsmeer in uw oor?	Raadpleeg uw huisarts.
Geen geluid	Staat het hoortoestel uit?	Zet het aan.
	Is het hoortoestel opgeladen?	Laad het hoortoestel op. (Zie de gebruikershandleiding van uw Charger.)
	Is de receiver tube beschadigd of is het oorstukje verstopt?	Bezoek uw hoorspecialist.
	Zit er veel oorsmeer in uw oor?	Raadpleeg uw huisarts.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Batterij is erg snel leeg.	Stond uw hoortoestel een lange tijd aan?	Schakel uw hoortoestellen altijd uit als u ze niet gebruikt of plaats ze in de lader om op te laden. De batterijen gaan sneller leeg als u gebruik maakt van draadloze functies zoals streaming van uw smart toestel of van uw televisie met onze TV Streamer.
	Is het hoortoestel 3-4 jaar oud?	Bezoek uw hoorspecialist.
Hoortoestel laadt niet op	Is het hoortoestel correct in de oplader geplaatst?	Plaats het hoortoestel opnieuw in de Charger. (Zie de gebruikershandleiding van uw Charger.)
	Is de oplader van de hoortoestellen opgeladen (alleen premium oplader) of aangesloten op een stopcontact?	Laad de hoortoestel oplader op. (Zie de gebruikershandleiding van uw Charger.)

Juridische informatie

Garanties en reparaties

De fabrikant geeft garantie op hoortoestellen in geval van fabricage- of materiaalfouten, zoals beschreven in de van toepassing zijnde garantiedocumenten. Conform het servicebeleid belooft de fabrikant een functionaliteit te garanderen die op zijn minst gelijk is aan die van het originele hoortoestel. Als mede-ondertekenaar van het United Nations Global Compact-initiatief heeft de producent zich ertoe verbonden om zijn servicebeleid uit te voeren volgens de gangbare milieuvriendelijke normen. Hoortoestellen kunnen daarom, naar inzicht van de fabrikant, vervangen worden door nieuwe producten of door producten gefabriceerd uit nieuwe of gerepareerde gebruikte onderdelen, of gerepareerd met nieuwe of in nieuwstaat teruggebrachte componenten. De garantietermijn van de hoortoestellen staat op uw garantiebewijs dat verstrekt wordt door uw hoorspecialist.

Heeft uw hoortoestel onderhoud nodig, neem dan contact op met uw hoorspecialist voor bijstand.

Hoortoestellen die niet goed functioneren, moeten door een gekwalificeerd technicus worden gerepareerd. Probeer nooit zelf de behuizing van hoortoestellen te openen, anders vervalt het recht op garantie.

Omgevingsomstandigheden

Temperatuur test

ReSound hoortoestellen worden onderworpen aan diverse temperatuur- en vochttesten tijdens verwarmingscycli tussen -25°C (-13°F) en 70°C (158°F) volgens interne en industrie standaarden.

Tijdens gebruik

Tijdens normaal gebruik mag de temperatuur niet buiten de grenswaarden komen van 5°C (41°F) tot 40°C (104°F) bij een relatief vochtigheidsbereik van 15% tot 90%, niet-condenserend, maar zonder dat een waterdampdeeldruk van meer dan 50 hPa nodig is. Een atmosferische druk tussen 700 hPa en 1060 hPa is acceptabel.



VOORZORGSMaatregel: Tijdens gebruik kunnen uw hoortoestellen temperaturen tot 43 °C (109 °F) bereiken.

Tijdens het opladen

Tijdens het opladen moet de omgevingstemperatuur binnen de grenswaarden van 10 °C (50 °F) tot 35 °C (95 °F).

Het opladen van uw hoortoestellen bij omgevingstemperaturen boven de 35 °C (95 °F) kan leiden tot langere oplaadtijden.

Tijdens transport of opslag

Tijdens vervoer of opslag mag de temperatuur deze grenswaarden niet overschrijden:

- -25 °C (-13 °F) tot 5 °C (41 °F)
- 5°C (41 °F) tot 35°C (95°F) bij een relatieve vochtigheid tot 90%, zonder condensatie
- 35°C (95°F) tot 60°C (140°F) bij een waterdampdruk tot 50 hPa.

Opwarmingstijd: (Vanaf -25 °C (-13 °F) bij plaatsing bij 20 °C (68 °F)): 15 minuten.

Afkoelingstijd: (Vanaf 60°C (140°F) bij plaatsing bij 20°C (68°F)): 20 minuten.

Verwachte levensduur

De verwachte levensduur van het product bij gebruik zoals bedoeld is:

Product-	Levensduur
Hoortoestel	5 jaar
Ingebouwde oplaadbare batterij	5 jaar
Eartip	3 maanden
Receivers	2 jaar
Elektronische accessoires (bijv. draadloze accessoires)	5 jaar

Verklaring

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-. Gebruik is alleen toegestaan als het aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

1. Dit apparaat mag geen storende interferentie veroorzaken.
2. Dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die een mogelijk ongewenste werking veroorzaakt.

LET OP: Dit apparaat is getest en voldoet aan de eisen die aan een Klasse B digitaal apparaat worden gesteld, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze regels zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen storende interferentie wanneer het apparaat functioneert in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie energie en kan dit ook uitstralen. Als de installatie en het gebruik van de apparatuur niet volgens de instructies wordt uitgevoerd, kan dat leiden tot storende interferentie op radiocommunicatie.

Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden bij een individuele installatie. U controleert of dit apparaat storende interferentie veroorzaakt op radio- of televisieontvangst door het uit en aan te zetten. U kunt de interferentie wellicht corrigeren met één van de volgende maatregelen:

- Verplaats of richt de antenne van de receiver opnieuw
- Vergroot de afstand tussen de receiver en het apparaat
- Sluit dit apparaat op een ander voedingscircuit aan dan de receiver
- Raadpleeg de verkoper of een ervaren radio-/televisiemonteur.

Veranderingen of modificaties kunnen het recht op gebruik van dit apparaat ongeldig maken.

De producten zijn in overeenstemming met de volgende wettelijke vereisten

- In de EU: Het toestel voldoet aan de algemene veiligheids- en prestatie-eisen volgens bijlage I van de Europese Verordening voor medische apparatuur 2017/745 (MDR).
- Hierbij verklaart GN Hearing A/S dat de radioapparaattypes DURR1A en DURR1B in overeenstemming zijn met Richtlijn 2014/53/EU.
- De volledige tekst van de Europese conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
www.declarations.resound.com/en.
- In de VS: FCC CFR 47 Deel 15, subonderdeel C.
- In Canada: deze hoortoestellen zijn gecertificeerd onder de regels van ISED.
- Japanse radiowetgeving en Japanse zakelijke telecommunicatiewetgeving: Dit apparaat is gecertificeerd conform de Japanse Radiowetgeving (電波法) en de Japanse Zakelijke Telecommunicatiewetgeving (電気通信事業法). Dit apparaat mag niet aangepast worden (anders wordt het toegekende toewijzingsnummer ongeldig).
- Raadpleeg voor andere internationale wettelijke vereisten de wettelijke vereisten van het specifieke land.

Type benamingen

De benaming van de hoortoesteltypen beschreven in deze gebruikershandleiding zijn:

DURR1A, FCC ID: X26DURR1A, IC: 6941C-DURR1A

DURR1B, FCC ID: X26DURR1B, IC: 6941C-DURR1B

Varianten hoortoestellen

De beschikbaarheid van modellen kan per land verschillen.

Micro Receiver-in-het-oor hoortoestellen van het type **DURR1A** met FCC ID: X26DURR1A, IC: nummer 6941C-DURR1A en oplaadbare li-ion accu zijn verkrijgbaar in de volgende varianten:

VI960S-DRWC, VIX60S-DRWC.

Met de **Micro Receiver-in-het-oor** hoortoestellen van het type **DURR1B** met FCC ID: X26DURR1B, IC: nummer 6941C-DURR1B en oplaadbare Li-Ionaccu zijn beschikbaar in de volgende varianten:

VI760S-DRWC, VI560S-DRWC, VI460S-DRWC, VI160S-DRWC.

Met de **Mini Receiver-in-het-oor** hoortoestellen van het type **DURR1B** met FCC ID: X26DURR1B, IC: nummer 6941C-DURR1B en oplaadbare Li-Ionaccu zijn beschikbaar in de volgende varianten:

SA460-DRWC, SA360-DRWC, SAX60-DRWC.

Het nominaal verzonden RF-uitgangsvermogen is: -7.0 dBm.

Dit hoortoestel verzendt en ontvangt RF-signalen in het frequentiebereik 2,4 GHz - 2,48 GHz.



Alle bovenstaande hoortoestellen hebben een inductief systeem dat werkt op de frequentie 10,66 MHz. De kracht van het magnetisch veld van de radio is: Max. -24 dBµA/m op een afstand van 10 m.

Technische specificaties

RIE — LP/MP receiver

Modellen, V1960S-DRWC, V1960S-DRWC, V1760S-DRWC, V1560S-DRWC, V1460S-DRWC, V1160S-DRWC, SA460-DRWC, SA360-DRWC, SAX60-DRWC.

		LP	MP	
Referentietest-versterking (60 dB SPL input) (De 2 onderste curves in de grafiek van maximale en referentietest-versterking)	HFA	31	36	dB
Maximale versterking (50 dB SPL input) (De 2 bovenste curves in de grafiek van maximale en referentietest-versterking)	Max. HFA	56 50	60 55	dB
Maximale output (90 dB SPL input)	Max. HFA	113 109	115 113	dB SPL
Totale harmonische vervorming	500 Hz 800 Hz 1600 Hz 3200 Hz	0.6 0.8 1.4 0.6	0.7 0.9 1.3 0.6	%
Equivalenten ingangsrui, lawaaionderdrukking uit 1/3 octaaf equivalenten ingangsrui, ruisonderdrukking uit	HFA 1600 Hz	22 8	20 9	dB SPL
Frequentiebereik IEC 60118-0: 2015	HFA	<200 tot >8000	<200 tot >8000	Hz
Levensduur batterij (Batterijtype Oplaadbaar)*	Typisch Max.	24 30	24 30	Uren

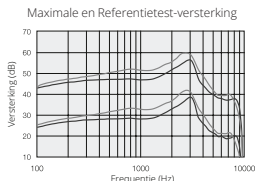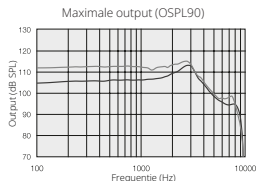



Gemeten volgens ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015, JIS C 5512: 2015, 2cc coupler.

* Verwachte gebruiksduur van de oplaadbare accu is afhankelijk van: actieve features, het gebruik van draadloze accessoires, de mate van gehoorverlies, leeftijd van de accu en de geluidsomgeving.

RIE — HP/UP receiver

Modellen: VI960S-DRWC, VX60S-DRWC, VI760S-DRWC, VI560S-DRWC, VI460S-DRWC, VI160S-DRWC*, SA460-DRWC, SA360-DRWC, SAX60-DRWC.

		HP	UP	
Referentietest-versterking (60 dB SPL input) (De 2 onderste curves in de grafiek van maximale en referentietest-versterking)	HFA	41	46	dB
Maximale versterking (50 dB SPL input) (De 2 bovenste curves in de grafiek van maximale en referentietest-versterking)	Max. HFA	60 54	71 65	dB
Maximale output (90 dB SPL input)	Max. HFA	120 118	129 123	dB SPL
Totale harmonische vervorming	500 Hz 800 Hz 1600 Hz 3200 Hz	0.5 0.8 0.8 0.4	0.5 0.4 0.1 0.1	%
Equivalente ingangsrui, lawaaionderdrukking uit 1/3 octaaf equivalente ingangsrui, ruisonderdrukking uit	HFA 1600 Hz	21 9	20 8	dB SPL
Frequentiebereik IEC 60118-0: 2015	HFA	<200 tot 6590	<200 tot 4650	Hz
Levensduur batterij (Batterijtype Oplaadbaar)**	Typisch Max.	24 30	30 34	Uren

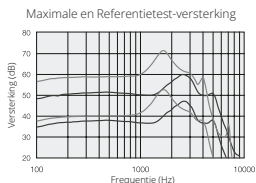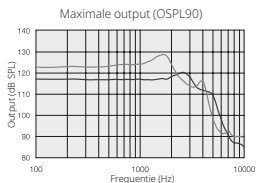

Gemeten volgens ANSI
S3.22-2014, IEC 60118-
0:2015, JIS C 5512:
2015, 2cc coupler.

* Model VI160S-DRWC heeft geen vermogensniveau UP.


** Verwachte gebruiksduur van de oplaadbare accu is afhankelijk van: actieve features, het gebruik van draadloze accessoires, de mate van gehoorverlies, leeftijd van de accu en de geluidsomgeving.

RIE — MM receiver


Modellen: V1960S-DRWC, V1X60S-DRWC, V1760S-DRWC, V1560S-DRWC, V1460S-DRWC, V1160S-DRWC*

			MM
Referentietest-versterking (60 dB SPL input) (De onderste curve in de grafiek van maximale en referentietest-versterking)	HFA	37	dB
Maximale versterking (50 dB SPL input) (De bovenste curve in de grafiek van maximale en referentietest-versterking)	Max. HFA	61 50	dB
Maximale output (90 dB SPL input)	Max. HFA	115 113	dB SPL
Totale harmonische vervorming	500 Hz	0.4	%
	800 Hz	0.6	
	1600 Hz	0.4	
	3200 Hz	0.5	
Equivalente ingangsrui, lawaaionderdrukking uit	HFA	22	dB SPL
1/3 octaaf equivalente ingangsrui, ruisonderdrukking uit	1600 Hz	9	
Frequentiebereik IEC 60118-0: 2015		<200 tot >8000	Hz
Levensduur batterij (Batterijtype Oplaadbaar)*	Typisch Max.	24 30	Uren

Maximale output (OSPL90)

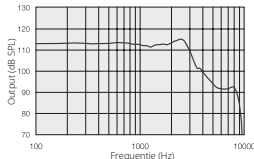

Maximale en Referentietest-versterking

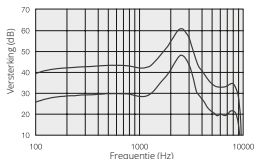

Gemeten volgens ANSI
S3.22-2014, IEC 60118-
0:2015, JIS C 5512: 2015,
2cc coupler.

* Model V1160S-DRWC heeft geen vermogensniveau MM.

** Verwachte gebruiksduur van de oplaadbare accu is afhankelijk van: actieve features, het gebruik van draadloze accessoires, de mate van gehoorverlies, leeftijd van de accu en de geluidsomgeving.

Aanvullende informatie

Erkenningen

Delen van deze software zijn geschreven door Kenneth Mackay (micro-ecc) en er is een licentie verschaft onder de volgende voorwaarden:

Copyright © 2014, Kenneth MacKay. Alle rechten voorbehouden.

Herdistributie en gebruik in broncode en binaire vorm, al dan niet gewijzigd, zijn toegestaan mits er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- Herdistributie van de broncode moet in overeenstemming zijn met bovenstaande copyrightmelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer.
- Herdistributie in binaire vorm moet bovenstaande copyright-melding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer in de documentatie en/of andere materialen bevatten die geleverd worden bij de distributie.

DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DE COPYRIGHTHOUDERS EN DEELNEMERS GELEVERD OP EIGEN BATE EN SCHADE EN ALLE UITDRUKKELIJKE OF GEÏMPliceERDE GARANTIES, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GEÏMPliceERDE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN AFGeweZEN. IN GEEN ENKEL GEVAL ZIJN DE COPYRIGHT-HOUDER OF DEELNEMERS AANSprakELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT AANKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS, WINST OF BEDRIJFSONDERBREKING), HOE DAN OOK VEROORZAakt EN OP BASIS VAN IEDERE AANSprakELIJKHEIDSTHEORIE, ZOWEL IN CONTRACT, STRIKTE AANSprakELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD

(INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERSZINS) OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

LET OP: Het gebruik van de Made for Apple-badge betekent dat een accessoire bedoeld is om specifiek te koppelen aan een iPhone, iPad en iPod touch en dat deze is gecertificeerd door de ontwikkelaar om te voldoen aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor het functioneren van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en wetgevende reguleringen.

© 2024 GN Hearing A/S. Alle rechten voorbehouden. ReSound is een handelsmerk van GN Hearing A/S. Apple, het Apple-logo, iPhone, iPad en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. App Store is een handelsmerk van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. Android, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC.

Opmerkingen

Geproduceerd volgens de EU-
verordening betreffende
medische hulpmiddelen
2017/745:



GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Denemarken

Lokale contactpersonen:

Nederland

GN Hearing Benelux BV
Florijnweg 25
NL-6883 JN Velp
Tel: +31 (0)26 319 5000
info@gnresound.nl
resound.com

Contact België

GN Hearing Benelux BV
Postbus 85
NL-6930 AB Westervoort
Tel: + 32 (0)2 513 55 91
info@gnresound.be
resound.com